

# SKS® Reprise

## PROTHÈSE DE GENOU TRICOMPARTIMENTALE DE REPRISE

- > Version deep-dish rotatoire - fémur et tibia
- > Version PS fixe - tibia



Dispositif de classe III, pris en charge  
par les organismes d'assurance maladie.



# SKS® REPRISE : L'ESSENTIEL

## ROTULE

- › Sphérique
- › Cimentée à coupe, 5 diamètres
- › Sans ciment encastrée, 1 diamètre
- › PE haute densité\* (ISO 5834-1 & 2)

\*plot acier inox (ISO 5832-1) pour la version sans ciment

## INSERT

- › Deep-dish rotatoire (4 tailles)  
ou
- › PS fixe (6 tailles)
- › 4 épaisseurs
- › PE haute densité (ISO 5834-1 & 2)

## CALES TIBIALES

- › 4 ou 8 mm
- › Cimentées
- › CoCr (ISO 5832-4)

## QUILLE D'EXTENSION

- › Ø12 ou 15 mm
- › Longueur 40 ou 80 mm
- › Cimentée
- › CoCr (ISO 5832-12)

## QUILLE D'EXTENSION

- › Ø12 ou 15 mm
- › Longueur 40 ou 80 mm
- › Cimentée
- › CoCr (ISO 5832-12)

## CONDYLE REPRISE

- › CR Reprise (4 tailles)
- › Cimenté
- › CoCr (ISO 5832-4)

## CONDYLE EVO

- › CR (7 tailles)  
ou
- › PS (7 tailles)
- › Sans ciment / cimenté
- › CoCr (ISO 5832-4)

## CALES FÉMORALES

- › Distales ou postérieures
- › 4 ou 8 mm
- › Cimentées
- › CoCr (ISO 5832-12)

## EMBASE 1<sup>ÈRE</sup> INTENTION

- › Rotatoire (6 tailles)  
ou
- › Fixe (7 tailles)
- › Sans ciment / cimentée
- › CoCr\* (ISO 5832-4)

\*excepté embase fixe sans ciment en titane (ISO 5832-3)

## EMBASE REPRISE

- › Rotatoire de Reprise (6 tailles)  
ou
- › Fixe de Reprise (7 tailles)
- › Cimentée
- › CoCr (ISO 5832-4)



## INDICATIONS

La prothèse SKS® doit être utilisée en arthroplastie primaire du genou sur des patients adultes pour le traitement des pathologies suivantes : arthrose primaire, secondaire ou post-traumatique, arthrite rhumatoïde et nécrose avasculaire. De plus, la prothèse SKS® est également indiquée dans les cas de révision d'arthroplastie ultérieure du genou. Les composants de reprise sont particulièrement recommandés en cas de defect osseux ou de mauvaise qualité osseuse.

Veillez vous référer à la notice d'instructions pour la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde, les précautions, les effets indésirables, et le mode d'emploi.


## PRINCIPE

- › Condyle à trochlée torique épousant géométriquement la convexité du bouton rotulien.



## CONDYLE

Version CR Reprise, CR ou PS.

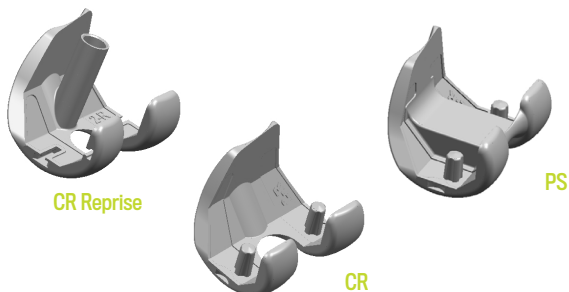


Particularités condyle CR Reprise :


- pré-queue de 40 mm orientée à 7° de valgus pouvant accueillir une queue d'extension,
- pas de plots distaux, mais présence de rainures en «T» distales et postérieures pour glisser des cales fémorales distales et postérieures.

## COMBINAISON D'IMPLANTS

SKS® Reprise rotatoire

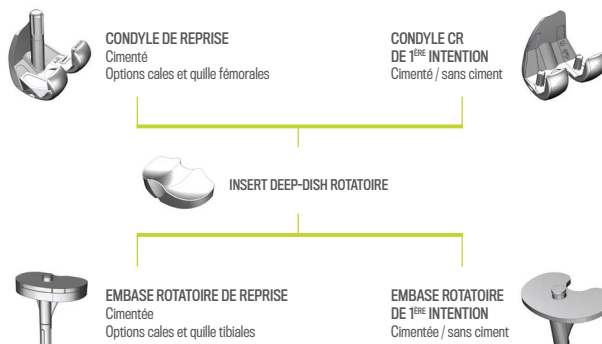


SKS® Reprise fixe

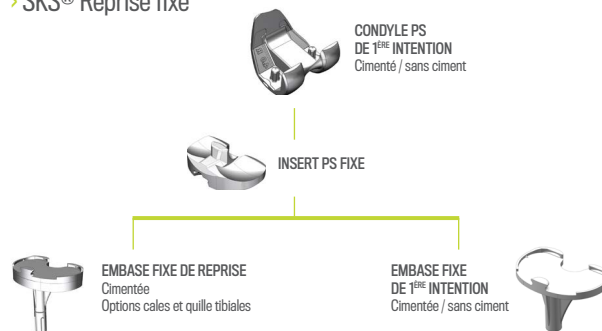

## INSERT

Version deep-dish rotatoire ou PS fixe.

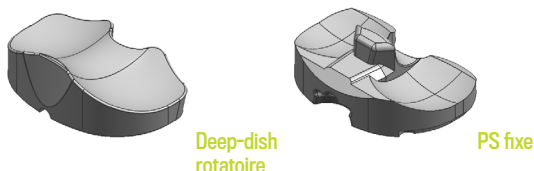


## EMBASE

Version rotatoire ou fixe de 1ère intention ou de reprise.




Particularités des versions Reprise :

- pré-queue de 40 mm pouvant accueillir une queue d'extension. Celle-ci est inclinée de 3° en postérieur pour éviter tout conflit avec la corticale antérieure (valable également pour les embases de 1ère intention),
- possibilité de visser des cales tibiales 1/2 ou entières. Empilement possible (à l'exception des 1/2 cales entre elles) permettant d'atteindre une épaisseur maximale de 16 mm (8+8).

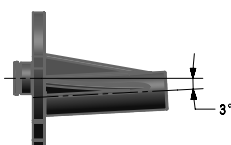

## ROTULE

Version cimentée : épaisseurs liées aux diamètres pour respecter l'aspect torique de la trochlée.

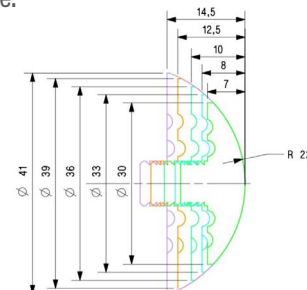

Version encastrée sans ciment : PE + plot inox + revêtement HAP.



## RÉFÉRENCES DES IMPLANTS

CONDYLE CR DE REPRISE	S/2	M/4	L/6	XL/7
-----------------------	-----	-----	-----	------

Cimenté	Droit	42200835	42400835	42600835	42700835
	Gauche	42200815	42400815	42600815	42700815

EMBASE ROTATOIRE DE REPRISE	S/2	SM/3	M/4	ML/5	L/6	XL/7
-----------------------------	-----	------	-----	------	-----	------

Cimentée	42200825	42300825	42400825	42500825	42600825	42800825
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

EMBASE FIXE DE REPRISE	S/2	SM/3	M/4	ML/5	L/6	LXL/6b	XL/7
------------------------	-----	------	-----	------	-----	--------	------

Cimentée monobloc	42100828	42200828	42300828	42400828	42500828	42600828	42700828
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CALE TIBIALE ENTIÈRE + VIS	S/2	M/4	L/6	XL/7
----------------------------	-----	-----	-----	------

Cimentée	Ép. 4 mm	41104128	41304128	41504128	41704128
	Ép. 8 mm	41108128	41308128	41508128	41708128

1/2 CALE TIBIALE + VIS	S/2	M/4	L/6	XL/7
------------------------	-----	-----	-----	------

Cimentée	Ép. 4 mm	42104228	42304228	42504228	42704228
	Ép. 8 mm	42108228	42308228	42508228	42708228

CALE DISTALE FÉMORALE	S-M/2-4	L-XL/6-7
-----------------------	---------	----------

Cimentée	Ép. 4 mm	42204111	42604111
	Ép. 8 mm	42208111	42608111

CALE POSTÉRIEURE FÉMORALE	S/2	M/4		L/6		XL/7	
		ID/EG	ED/IG	ID/EG	ED/IG	ID/EG	ED/IG

Cimentée	Ép. 4 mm	42214121	42224121	42414121	42424121	42614121	42624121	42714121	42724121
	Ép. 8 mm	42218121	42228121	42418121	42428121	42618121	42628121	42718121	42728121

QUILLE D' EXTENSION	Ø12	Ø15
---------------------	-----	-----

L 40 mm	42120478	42150478
---------	----------	----------

L 80 mm	42120878	42150878
---------	----------	----------

En cas de reprise partielle et de l'utilisation d'implants et d'instrumentations de 1<sup>ère</sup> intention, se référer aux références proposées dans la documentation produit SKS® EVO - DOC2823  
 Pour la compatibilité des tailles entre les implants, veuillez vous référer à l'addendum SKS® Reprise - DOC2831

## RÉFÉRENCES DE L'INSTRUMENTATION

(A41376 + A41375) ou A150447

## SIÈGE SOCIAL & FABRICANT

Aston Medical

19 rue Victor Grignard

42000 Saint-Étienne - France

Tél. : +33 (0)4 77 93 00 04 - Fax : +33 (0)4 77 74 35 93 - Email : contact@aston-sem.com

Le présent document n'a pas de valeur contractuelle, le fabricant se réservant le droit d'effectuer sans préavis toute modification visant à améliorer la qualité du produit. Avant toute utilisation d'un produit ASTON-SEM, veuillez vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire pour la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde, les précautions, les effets indésirables, et le mode d'emploi. Cette documentation produit n'est pas valide pour le marché des États-Unis.

Marques commerciales™ et marques déposées® de ASTON-SEM ou de ses filiales. ©2020 ASTON-SEM ou ses filiales. Tous droits réservés. Réalisation : MyPro  
 Organisme Notifié 1639 - Le marquage CE n'est valable que s'il figure également sur l'étiquette de l'emballage externe. SKS® Reprise - Documentation produit - DOC31002a - novembre 2021



[www.aston-sem.com](http://www.aston-sem.com)

